



**DR. WEIGERT**

Hygiene mit System

Labor



Das  
**Produkt-  
Programm.**

Reinigung und Desinfektion für  
Laboratorien, Tierhaltung und industrielles Spülen.

# neodisher® – Erfahrung für Ihre **Sicherheit.**

## Seit über 30 Jahren

... begleitet neodisher® die technische Entwicklung der maschinellen Reinigung und setzt die Standards. neodisher® Konzepte garantieren erstklassige Ergebnisse, die Langlebigkeit hochwertiger Materialien und rückstandsfreie Sauberkeit.

Dr. Weigert hat in der maschinellen Reinigung von Laborglas und Utensilien Pionierarbeit geleistet. Wir lösen mit unserem speziellen Know-how selbst die schwierigsten Aufgaben. Kompetenz, der Sie vertrauen können.

## Kompetenz aus einer Hand.

Sauberkeit und Rückstandsfreiheit sind Grundvoraussetzungen für exakte Analyse- und Versuchsergebnisse in Laboratorien und der Tierhaltung sowie für die Weiterverarbeitung in industriellen Fertigungsprozessen.

Die verschiedenen Aufgabengebiete bringen vielfältige Verschmutzungsarten mit sich, die unterschiedliche physikalische und chemische Eigenschaften aufweisen – nutzen Sie unsere Kompetenz: Das Fachwissen unserer neodisher® Fachberater ist ein starkes Argument für Dr. Weigert. Wir beraten Sie in allen Fragen rund um die maschinelle Reinigung.

Innovative Prozesschemikalien, optimale Dosierung der Reinigungsmittel über moderne weigomatic® Dosiersysteme und zeitgemäße Konzepte bieten Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit, Wirtschaftlichkeit sowie Material- und Umweltverträglichkeit.

## System-Service für erstklassige Resultate.

System-Service steht für kontinuierliche Betreuung, damit erstklassige Resultate auch dauerhaft erzielt werden. Auf Basis einer jahrzehntelangen Erfahrung, durch exzellentes Fachwissen und eine enge Zusammenarbeit mit den Herstellern von Laborglas, Tierkäfigen sowie von Reinigungs- und Desinfektionsautomaten finden wir auf alle Fragen rasch die richtige Antwort. Wir sind mit allen Maschinen am Markt bestens vertraut. Dosieranlagen werden regelmäßig gewartet und schaffen die Voraussetzungen für sichere Abläufe.

Der neodisher® Fachberater ist Ihr Ansprechpartner für alle Fragestellungen – zuverlässig und professionell für die sichere Reinigung.



# neodisher® Produkt-Programm

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Maschinelle Reinigung von Laborglas und Utensilien ..... | 4-6   |
| Manuelle Reinigung von Laborglas und Utensilien .....    | 7     |
| Reinigung in der Tierhaltung .....                       | 8-9   |
| Industrielle Teilereinigung .....                        | 10-11 |
| Flächenreinigung und -desinfektion .....                 | 12    |
| Händehygiene .....                                       | 13    |
| Dosiertechnische Lösungen .....                          | 14-15 |
| Anwendungs- und Dosierhilfen .....                       | 16    |
| System-Service .....                                     | 17    |
| Anwendungsempfehlungen .....                             | 18-19 |





# Maschinelle Reinigung von Laborglas und Utensilien

## Sauberkeit und Rückstandsfreiheit

... sind Grundvoraussetzungen für exakte Analyse-Ergebnisse. Die verschiedenen Aufgabengebiete von Laboratorien bringen vielfältige Verschmutzungsarten mit sich, die unterschiedliche physikalische und chemische Eigenschaften aufweisen.

Eine rückstandsfreie Reinigung kann nur mit wirksamen und speziell abgestimmten Prozess-chemikalien und Programmabläufen erzielt werden. neodisher® garantiert exzellente Ergebnisse selbst bei höchsten Anforderungen.

| maschinelle Reinigung    | flüssig | universell einsetzbar | intensive Reinigungskraft | tensidfrei | phosphatfrei | Oxidationswirkung |
|--------------------------|---------|-----------------------|---------------------------|------------|--------------|-------------------|
| neodisher® LaboClean FLA | •       | •                     | •                         | •          | •            |                   |
| neodisher® LaboClean FT  | •       |                       |                           | •          |              | •                 |
| neodisher® LaboClean FM  | •       |                       | •                         |            | •            |                   |
| neodisher® LaboClean A8  |         | •                     | •                         | •          |              |                   |
| neodisher® LaboClean F   |         |                       | •                         | •          | •            |                   |
| neodisher® LaboClean LA  |         |                       | •                         |            |              |                   |
| neodisher® LaboClean GK  |         |                       |                           | •          |              | •                 |
| neodisher® LaboClean PLM |         |                       |                           |            |              |                   |
| neodisher® LaboClean UW  |         |                       |                           |            | •            | •                 |

### neodisher® LaboClean FLA

**Alkalischer Universalreiniger – Flüssigkonzentrat –  
Frei von Tensiden, Phosphorverbindungen und Oxidationsmitteln**

Universell einsetzbar. Mit ausgeprägter Reinigungskraft. Entfernt hartnäckige Rückstände auf Ölbasis und andere organische Verschmutzungen.

|           |         |         |          |      |         |
|-----------|---------|---------|----------|------|---------|
| Container | 1000 kg | 4112 03 | Kanister | 10 L | 4112 30 |
| Fass      | 280 kg  | 4112 13 | Kanister | 5 L  | 4112 33 |
| Kanister  | 25 kg   | 4112 26 |          |      |         |



### neodisher® LaboClean FT

**Alkalischer Reiniger – Flüssigkonzentrat –  
Mit Oxidationswirkung, frei von Tensiden**

Speziell zur rückstandsfreien Reinigung von Glaswaren für Zell- und Gewebekulturen, von Apothekenglas und Infusionsflaschen sowie im Bereich Mikrobiologie und Nuklearmedizin. Entfernt Nährbodenreste, Reste von Gewebekulturen und Zellrasen, Blut, Eiweiß, radioaktive Kontamination sowie andere organische Rückstände.

|           |         |         |          |       |         |
|-----------|---------|---------|----------|-------|---------|
| Container | 1000 kg | 4100 03 | Kanister | 25 kg | 4100 26 |
| Fass      | 260 kg  | 4100 13 | Kanister | 12 kg | 4100 30 |
|           |         |         | Kanister | 5 L   | 4100 33 |



### neodisher® LaboClean FM

**Alkalischer Intensivreiniger – Flüssigkonzentrat –  
Frei von Phosphaten und Oxidationsmitteln**

Mit stark emulgierender und dispergierender Wirkung. Besonders geeignet für die Entfernung von Ölen, Fetten, Harzen und Paraffinen.

|          |      |         |          |     |         |
|----------|------|---------|----------|-----|---------|
| Kanister | 20 L | 4066 26 | Kanister | 5 L | 4066 33 |
|----------|------|---------|----------|-----|---------|




# Maschinelle Reinigung von Laborglas und Utensilien



## neodisher® LaboClean A 8

### Alkalischer Universalreiniger – Pulver – Frei von Tensiden

Universell einsetzbar, mit ausgeprägter Reinigungskraft und hohem Schmutztragevermögen. Entfernt Blut, Serum, Lebensmittelrückstände, Pharmaka, Farben, Lacke, Gelatine und andere organische Rückstände.

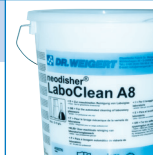

|       |       |         |          |           |         |
|-------|-------|---------|----------|-----------|---------|
| Eimer | 25 kg | 4102 66 | Flaschen | 12 x 1 kg | 4102 87 |
| Eimer | 10 kg | 4102 76 |          |           |         |

## neodisher® LaboClean F

### Hochalkalischer Intensivreiniger – Pulver – Frei von Phosphaten und Tensiden

Mit hoher Reinigungskraft. Besonders geeignet für die Entfernung von Harzen, organischen Farbstoffen und Filzstiftresten. Gute Komplexier- und Dispergierwirkung.



|       |       |         |       |          |         |
|-------|-------|---------|-------|----------|---------|
| Eimer | 25 kg | 4105 66 | Eimer | 4 x 3 kg | 4105 81 |
|-------|-------|---------|-------|----------|---------|

## neodisher® LaboClean LA

### Hochalkalischer Intensivreiniger – Pulver –

Mit stark emulgierender, dispergierender und entschäumender Wirkung. Besonders geeignet für die Entfernung von Fetten, Ölen, Harzen und Paraffinen.



|       |          |         |          |           |         |
|-------|----------|---------|----------|-----------|---------|
| Eimer | 25 kg    | 4106 66 | Flaschen | 12 x 1 kg | 4106 87 |
| Eimer | 4 x 3 kg | 4106 81 |          |           |         |

## neodisher® LaboClean GK

### Mildalkalischer Reiniger – Pulver – Frei von Tensiden

Speziell zur maschinellen Reinigung von Glaswaren für Zell- und Gewebekulturen, im Bereich Mikrobiologie und Nuklearmedizin sowie in Isotopenlaboratorien. Entfernt Nährbodenreste, Zellkultur- und Gewebereste, radioaktive Kontaminationen, organische Farb- und Pigmentverunreinigungen. Leicht abspülbar.




|       |       |         |  |  |  |
|-------|-------|---------|--|--|--|
| Eimer | 10 kg | 4103 76 |  |  |  |
|-------|-------|---------|--|--|--|

## neodisher® LaboClean PLM

### Mildalkalischer Reiniger – Pulver – Frei von Oxidationsmitteln

Besonders geeignet zur Entfernung von Cremegrundlagen und leicht emulgierbaren Rückständen, schaumdämpfend.

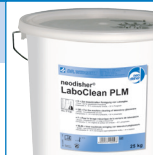

|       |       |         |          |           |         |
|-------|-------|---------|----------|-----------|---------|
| Eimer | 10 kg | 4122 76 | Flaschen | 12 x 1 kg | 4122 87 |
|-------|-------|---------|----------|-----------|---------|

## neodisher® LaboClean UW

### Alkalischer Reiniger – Pulver – Frei von Phosphaten

Speziell zur maschinellen Reinigung von Laborglas und Utensilien in Wasserlaboratorien, in serologischen Instituten und in der Phosphatindustrie. Insbesondere für Laborglas zur Verwendung bei empfindlichen Analysen, bei denen Spuren von Phosphorverbindungen stören würden.



|       |       |         |  |  |  |
|-------|-------|---------|--|--|--|
| Eimer | 10 kg | 4109 76 |  |  |  |
|-------|-------|---------|--|--|--|

# Maschinelle Reinigung von Laborglas und Utensilien

## Die maschinelle Reinigung

... ist ein schonendes Aufbereitungsverfahren. Die kurze Kontaktzeit mit dem Reiniger beugt Glaskorrosion vor. Gleichzeitig sorgt die hohe Temperatur in der Schlusspülung für eine gute, schnelle Trocknung. Das Verfahren ist bei Bedarf standardisierbar, validierbar und dokumentierbar.

| Übersicht             | neodisher® EM | neodisher® Entschäumer S | neodisher® N | neodisher® Z |
|-----------------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------|
| Reinigungsverstärkung | ●             |                          |              |              |
| Schaumdämpfung        | ●             |                          |              |              |
| Schaumverhinderung    |               | ●                        |              |              |
| Neutralisation        |               |                          | ●            | ●            |

### neodisher® EM

#### Reinigungskomponente – Flüssigkonzentrat –

Verbessert die Reinigungsleistung alkalischer und saurer Reiniger insbesondere bei der Entfernung von Feststoffen, Paraffinen, Ölen und Fetten in wässrigen Lösungen. Mit emulgierender, dispergierender und schaumdämpfender Wirkung.



|          |     |         |
|----------|-----|---------|
| Kanister | 5 L | 4300 33 |
|----------|-----|---------|

### neodisher® Entschäumer S

#### Antischaummittel – Flüssigkonzentrat –

Verhindert die Bildung von Schaum, selbst bei niedrigen Temperaturen reicht eine geringe Dosierung aus. Auf Basis von emulgierten Silikonölen.



|          |      |         |          |          |         |
|----------|------|---------|----------|----------|---------|
| Kanister | 10 L | 4301 30 | Flaschen | 10 x 1 L | 4301 48 |
|----------|------|---------|----------|----------|---------|

### neodisher® N

#### Saures Neutralisations- und Reinigungsmittel – Flüssigkonzentrat – Frei von Tensiden

Zur Neutralisation verschleppter Alkalireste sowie zur sauren Vorreinigung bzw. Reinigung von Laborglas. Kalk oder andere säurelösliche Rückständen werden entfernt. Leicht abspülbar. Auf Basis von Phosphorsäure.



|           |         |         |          |          |         |
|-----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| Container | 1000 kg | 4201 03 | Kanister | 12 kg    | 4201 30 |
| Fass      | 290 kg  | 4201 13 | Kanister | 5 L      | 4201 33 |
| Kanister  | 25 kg   | 4201 26 | Flaschen | 12 x 1 L | 4201 87 |

### neodisher® Z

#### Saures Neutralisations- und Reinigungsmittel – Flüssigkonzentrat – Frei von Tensiden und Phosphaten

Zur Neutralisation verschleppter Alkalireste sowie zur Entfernung säurelöslicher Rückstände in Laboratorien. Insbesondere für Laborglas zur Verwendung bei empfindlichen Analysen, bei denen Spuren von Phosphaten und Tensiden stören würden. Auf Basis organischer Säuren, materialschonend.



|          |        |         |          |          |         |
|----------|--------|---------|----------|----------|---------|
| Fass     | 240 kg | 4202 13 | Kanister | 5 L      | 4202 33 |
| Kanister | 20 L   | 4202 26 | Flaschen | 12 x 1 L | 4202 87 |
| Kanister | 10 L   | 4202 30 |          |          |         |

# Manuelle Reinigung von Laborglas und Utensilien



| manuelle Reinigung | neodisher® LM 2 | neodisher® LM 3 | neodisher® LM 10 | neodisher® PM 5 |
|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| flüssig            | ●               | ●               | ●                |                 |
| schaumarm          | ●               | ●               | ●                |                 |
| phosphatfrei       |                 | ●               |                  |                 |
| Oxidationswirkung  |                 |                 | ●                | ●               |

## Die manuelle Reinigung

... ermöglicht eine gezielte Behandlung hartnäckiger Anschmutzungen. Die Reiniger können nach Bedarf und Art der Anschmutzung variiert werden. Die individuell abgestimmte Reinigerauswahl gewährleistet eine optimale, materialschonende Aufbereitung.

### neodisher® LM 2

#### Mildalkalischer Reiniger – Flüssigkonzentrat –

Für die manuelle Reinigung und Vorreinigung von Laborglas im Ultraschall- und Tauchbad sowie für die Reinigung von Pipetten in Spezialspülmaschinen und die Nassautoklavierung von Laborglas vor der maschinellen Reinigung. Schaumarm, leicht abspülbar.



|          |       |         |          |      |         |
|----------|-------|---------|----------|------|---------|
| Kanister | 20 kg | 4403 26 | Kanister | 10 L | 4403 30 |
|----------|-------|---------|----------|------|---------|

### neodisher® LM 3

#### Alkalischer Reiniger – Flüssigkonzentrat – Frei von Phosphaten

Zur manuellen Reinigung und Vorreinigung von Laborglas sowie für die Reinigung von Pipetten und Viskosimetern in Spezialspülmaschinen. Besonders für die Reinigung von Laborgläsern in Wasser-, Phosphat- und Metalllaboratorien sowie für Laboratorien, in denen enzymatische und serologische Untersuchungen durchgeführt werden, geeignet. Auch für den maschinellen Einsatz. Schaumarm.



|          |      |         |          |          |         |
|----------|------|---------|----------|----------|---------|
| Kanister | 10 L | 4400 30 | Flaschen | 12 x 1 L | 4400 49 |
|----------|------|---------|----------|----------|---------|

### neodisher® LM 10

#### Alkalischer Reiniger – Flüssigkonzentrat – Mit Oxidationswirkung, frei von Tensiden

Zur Reinigung und Vorreinigung von Laborglas im Tauchbad und zur Dekontamination von mit radioaktiven Rückständen behafteten Gegenständen. Auch schwer entfernbare organische Rückstände werden hervorragend beseitigt. Schaumfrei.



|          |      |         |  |  |  |
|----------|------|---------|--|--|--|
| Kanister | 10 L | 4401 30 |  |  |  |
|----------|------|---------|--|--|--|

### neodisher® PM 5

#### Mildalkalischer Reiniger – Pulver –

Für die manuelle Reinigung von Laborglas im Tauchbad. Selbsttätiges Reinigungsvermögen gegenüber Blut und Eiweiß, Lebensmittelresten, anorganischen und organischen Rückständen. Besonders materialschonend und leicht abspülbar.



|       |          |         |  |  |  |
|-------|----------|---------|--|--|--|
| Eimer | 4 x 3 kg | 4402 81 |  |  |  |
|-------|----------|---------|--|--|--|



# Reinigung in der Tierhaltung

## Die Reinigung von Equipment in Tierhaltungseinrichtungen

... kann grundsätzlich mit sauer eingestellten, pH-neutralen oder alkalischen Prozesschemikalien erfolgen. Für Tränkeflaschen eignen sich sauer eingestellte Reinigungsmittel.

| Reinigung      | neodisher® LaboClean FLA | neodisher® N | neodisher® LM 2 |
|----------------|--------------------------|--------------|-----------------|
| maschinell     | •                        | •            |                 |
| manuell        |                          |              | •               |
| alkalisch      | •                        |              | •               |
| sauer          |                          | •            |                 |
| tensidfrei     | •                        | •            |                 |
| aktivchlorfrei | •                        | •            | •               |

### neodisher® LaboClean FLA

**Alkalisches Reinigungsmittel – Flüssigkonzentrat –  
Frei von Tensiden und Aktivchlor**

Entfernt organische Rückstände, besonders geeignet zur Reinigung von Mäuse- und Rattenkäfigen aus Polysulfon, Polycarbonat, Polyetherimid, Polyphenylsulfon oder Edelstahl.



|           |         |         |          |      |         |
|-----------|---------|---------|----------|------|---------|
| Container | 1000 kg | 4112 03 | Kanister | 10 L | 4112 30 |
| Fass      | 280 kg  | 4112 13 | Kanister | 5 L  | 4112 33 |
| Kanister  | 25 kg   | 4112 26 |          |      |         |

### neodisher® N

**Saures Reinigungsmittel – Flüssigkonzentrat –  
Frei von Tensiden**

Entfernt säurelösliche Rückstände wie z.B. Urinstein oder Kalk. Besonders geeignet für Tierkäfige und Tränkeflaschen aus Polysulfon, Polycarbonat, Polyetherimid, Polyphenylsulfon oder Edelstahl. Sehr gut abspülbar. Auf Basis von Phosphorsäure.



|           |         |         |          |          |         |
|-----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| Container | 1000 kg | 4201 03 | Kanister | 12 kg    | 4201 30 |
| Fass      | 290 kg  | 4201 13 | Kanister | 5 L      | 4201 33 |
| Kanister  | 25 kg   | 4201 26 | Flaschen | 12 x 1 L | 4201 87 |

### neodisher® LM 2


**Mildalkalischer Reiniger – Flüssigkonzentrat –**

Für die manuelle Reinigung und Vorreinigung von Tierkäfigen und Zubehör im Tauchbad. Entfernt anorganische und organische Rückstände, wie z.B. verkrustetes Blut, Eiweiß und Kot. Schaumarm, leicht abspülbar.



|          |       |         |          |      |         |
|----------|-------|---------|----------|------|---------|
| Kanister | 20 kg | 4403 26 | Kanister | 10 L | 4403 30 |
|----------|-------|---------|----------|------|---------|

# Reinigung in der Tierhaltung

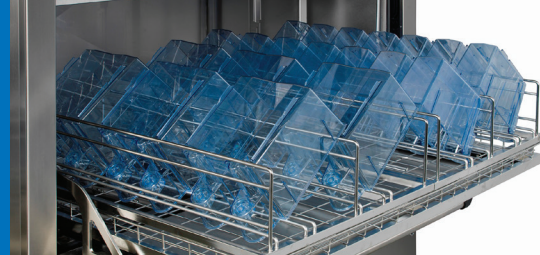

| Nachspülung | neodisher® Polyklar | neodisher® TS |
|-------------|---------------------|---------------|
| maschinell  | ●                   | ●             |
| sauer       | ●                   | ●             |
| tensidfrei  | ●                   |               |

## Klarspülmittel

... unterstützen die Trocknung und vermeiden Tropfen- und Fleckenbildung. Saure Klarspülmittel binden die Restwasserhärte und neutralisieren die Alkalität von enthärtetem Nachspülwasser sowie alkalische Reinigerrückstände. Geeignete Klarspülmittel verhindern Materialschäden bei Kunststoffen wie Polycarbonat oder Polysulfon.

### neodisher® Polyklar

#### Klarspülmittel – Flüssigkonzentrat – Frei von Tensiden

Besonders geeignet für Tierkäfige aus Polycarbonat, Polysulfon, Polyphenylsulfon und Polyetherimid. Sauer eingestellt, neutralisiert alkalische Rückstände und beugt einem Materialangriff bei Polycarbonat und Polysulfon beim anschließenden Autoklavieren vor. Verhindert die Entstehung von Spannungsrissen während des Autoklavierens.



|      |        |         |          |      |         |
|------|--------|---------|----------|------|---------|
| Fass | 200 kg | 4019 13 | Kanister | 10 L | 4019 30 |
|------|--------|---------|----------|------|---------|

### neodisher® TS

#### Klarspülmittel – Flüssigkonzentrat –

Für eine schnelle und fleckenfreie Trocknung. Verkürzt die Trocknungszeit signifikant. Besonders geeignet für Tierkäfige aus Polycarbonat, Polyetherimid oder Edelstahl. Sauer eingestellt, neutralisiert alkalische Rückstände und beugt einem Materialangriff bei Polycarbonat beim anschließenden Autoklavieren vor.



|           |        |         |          |          |         |
|-----------|--------|---------|----------|----------|---------|
| Container | 800 kg | 3109 03 | Kanister | 10 L     | 3109 30 |
| Fass      | 200 kg | 3109 13 | Flaschen | 12 x 1 L | 3109 49 |
| Kanister  | 20 kg  | 3109 26 |          |          |         |

## Die Weiterentwicklung

... moderner Spültechnik ermöglicht die automatische Reinigung von Bauteilen und Elementen aus zahlreichen industriellen Fertigungsprozessen. Dazu zählen beispielsweise elektronische Leiterplatten, Lötrahmen, sensible Optiken, Airbagbauteile oder Transportkisten aus Kunststoff. Dr. Weigert hat mit den Herstellern der Reinigungsgeräte und Anwendern die passenden Programme und Reinigungsmittel entwickelt.

| maschinelle Reinigung        | neodisher® ProTech 5 | neodisher® ProTech 8 | neodisher® ProTech 9 | neodisher® ProTech 10 | neodisher® FS |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| pH-neutral                   | •                    |                      |                      |                       |               |
| frei von Silikonverbindungen | •                    | •                    | •                    | •                     | •             |
| frei von Oxidationsmitteln   | •                    | •                    | •                    | •                     | •             |
| frei von Phosphaten          | •                    |                      |                      | •                     | •             |
| schaumdämpfend/entschäumend  | •                    | •                    | •                    |                       | •             |
| flüssig                      | •                    |                      | •                    | •                     | •             |

### neodisher® ProTech 5

**pH-neutrales Reinigungsmittel – Flüssigkonzentrat –  
Frei von Phosphaten, Oxidationsmitteln und Silikonverbindungen**

Für die maschinelle Reinigung von Leiterplatten, Gehäusen, Bauteilen aus Kunststoff oder Metall und anderen hochsensiblen Materialien. Besonders geeignet zur Entfernung von Flussmitteln und Staub. Mit hoher Materialschonung, schaumdämpfend.



Kanister 20 L 4014 26

Kanister 5 L 4014 33

### neodisher® ProTech 8

**Mildalkalisches Reinigungsmittel – Pulver –  
Frei von Oxidationsmitteln und Silikonverbindungen**

Für die maschinelle Reinigung von maschinellen Reinigung von Lötrahmen sowie Oberflächen aus Edelstahl, Aluminium, Keramik, Glas und alkalibeständigen Kunststoffen. Besonders geeignet zur Entfernung von Lötpasten und Kolophonium. Materialschonend, wirkt stark entschäumend. Gute Wasserhärteabbindung.



Eimer 8 kg 4013 76

### neodisher® ProTech 9


**Alkalisches Reinigungsmittel – Flüssigkonzentrat –  
Frei von Oxidationsmitteln und Silikonverbindungen**

Für die maschinelle Reinigung von Leiterplatten und anderen Bauteilen aus alkalibeständigen Metallen und Kunststoffen. Besonders geeignet zur Entfernung von Flussmitteln und Staub. Gute benetzende und entschäumende Wirkung.



Kanister 5 L 4011 33

# Industrielle Teilereinigung

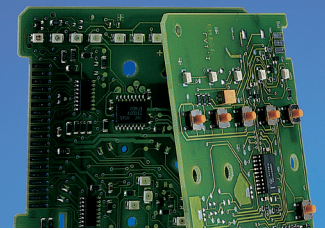

## neodisher® ProTech 10

**Hochalkalisches Reinigungsmittel – Flüssigkonzentrat –  
Frei von Phosphaten, Komplexbildnern, Aktivchlor und Silikonverbindungen**

Zur maschinellen Reinigung von Fertigteilen, wie z. B. beschichtete Datenglasplatten sowie von Bauteilen im Bereich der Metallindustrie. Entfernt verseifbare und alkalilösliche Rückstände.



|          |       |         |
|----------|-------|---------|
| Kanister | 25 kg | 3313 26 |
|----------|-------|---------|

## neodisher® FS

**Hochalkalisches Reinigungsmittel – Flüssigkonzentrat –  
Frei von Phosphaten, Aktivchlor und Silikonverbindungen**

Für die maschinelle Reinigung von Fertigteilen wie z.B. Lötrahmen aus Edelstahl, Kunststofftransportkästen sowie von Laborglas. Entfernt alkalilösliche bzw. alkaliverseifbare Rückstände wie z.B. Kolophonium, Metallabrieb, Öl und Fett. Mit ausgeprägtem Schmutztragevermögen. Entschäumende Wirkung.



|      |        |         |          |       |         |
|------|--------|---------|----------|-------|---------|
| Fass | 280 kg | 4116 13 | Kanister | 25 kg | 4116 26 |
|------|--------|---------|----------|-------|---------|

## neodisher® ProTech 16

**Korrosionsschutz- und Nachspülmittel – Flüssigkonzentrat –  
Frei von Oxidationsmitteln und Silikonverbindungen**

Zum Schutz vor Korrosionen beim maschinellen Spülen von Fertigteilen oder Halbfertigteilen aus korrosionsempfindlichen Stählen. Mit guten Benetzungseigenschaften und schaumdämpfender Wirkung. Geeignet als temporärer Korrosionsschutz von Metalloberflächen.



|          |     |         |
|----------|-----|---------|
| Kanister | 5 L | 4017 33 |
|----------|-----|---------|

# Flächenreinigung und Flächendesinfektion

## neoform MED AF\*

**Aldehydfreier Desinfektionsreiniger – Flüssigkonzentrat –  
Bakterizid, tuberkulozid, levurozid, begrenzt viruzid**

Für die Reinigung und Desinfektion von Medizinprodukten und medizinischem Inventar. Einsatz im Scheuer-Wischverfahren, über rotierende Bürsten und Sprühgeräte. VAH<sup>1</sup>-gelistet und in der Viruzidie-Liste des IHO<sup>2</sup> eingetragen.

Kanister      5 L      4056 35



## neoform MED FF\*

**Desinfektionsreiniger – Flüssigkonzentrat –  
Bakterizid, tuberkulozid, levurozid, viruzid, wirksam gegen C. difficile**

Für die Reinigung und Desinfektion von Medizinprodukten und medizinischem Inventar. Einsatz im Scheuer-Wischverfahren, über rotierende Bürsten und Sprühgeräte. VAH<sup>1</sup>-gelistet und in der Viruzidie-Liste des IHO<sup>2</sup> eingetragen.

Kanister      5 L      4057 35



## neoform K plus\*

**Desinfektionsreiniger für Oberflächen und Geräte im Lebensmittelbereich – Flüssigkonzentrat –  
Frei von Parfüm und Farbstoffen – Bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid**

Zur kombinierten Reinigung und Desinfektion in einem Arbeitsgang mit hervorragender Reinigungsleistung und sicherer Desinfektion. In der Desinfektionsmittel-Liste des IHO<sup>2</sup> eingetragen.

|          |        |         |          |         |         |
|----------|--------|---------|----------|---------|---------|
| Fass     | 200 kg | 3223 13 | Flaschen | 6 x 2 L | 3223 42 |
| Kanister | 10 L   | 3223 30 |          |         |         |



## neoform MED rapid

**Schnell-desinfektionsmittel – Gebrauchsfertige Lösung –  
Bakterizid, levurozid, tuberkulozid, begrenzt viruzid, wirksam gegen Noroviren**

Alkoholische Lösung zur Desinfektion von Medizinprodukten. Einsatz im Wisch- oder Sprühverfahren. VAH<sup>1</sup>-gelistet und in der Viruzidie-Liste des IHO<sup>2</sup> eingetragen.

Flaschen      12 x 0,75 L      4070 47



## neoform K Spray\*

**Schnell-desinfektionsmittel für Flächen und Geräte im Lebensmittelbereich – Gebrauchsfertige Lösung –  
Bakterizid, fungizid, begrenzt viruzid, wirksam gegen Noroviren**

Zur schnellen Desinfektion von vorgereinigten Arbeitsflächen und Geräten. Trocknet rückstandsfrei ab – kein Nachspülen erforderlich. DVG<sup>3</sup>-gelistet. In der Desinfektionsmittel-Liste des IHO<sup>2</sup> eingetragen.

|          |      |         |          |             |         |
|----------|------|---------|----------|-------------|---------|
| Kanister | 10 L | 3638 30 | Flaschen | 12 x 0,75 L | 3638 47 |
|----------|------|---------|----------|-------------|---------|



\* Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

<sup>1</sup> Verbund für Angewandte Hygiene e.V.

<sup>2</sup> Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz

<sup>3</sup> Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft

# Händehygiene



## triformin® HR

### Händereiniger

Reinigt schonend auch stark verschmutzte Hände. Geeignet für häufiges Händewaschen. Sehr gute Hautverträglichkeit, dermatologisch bestätigt. Dosierung über die triformin® dispenser 1.0 und triformin® dispenser 0.5.



|          |          |         |          |             |         |
|----------|----------|---------|----------|-------------|---------|
| Kanister | 10 L     | 3001 30 | Flaschen | 20 x 500 ml | 3001 63 |
| Flaschen | 10 x 1 L | 3001 48 |          |             |         |

## triformin® wash

### Waschlotion

Zur pflegenden Hände- und Körperreinigung. Sehr gute Hautverträglichkeit, dermatologisch bestätigt. Besonders geeignet für normale, trockene und empfindliche Haut. Auf Basis natürlicher pflanzlicher Rohstoffe, mit Aloe Vera und natürlichem Bienenhonig. Seifen- und alkalifrei. Dosierung über die triformin® dispenser 1.0 und triformin® dispenser 0.5.



|          |          |         |          |             |         |
|----------|----------|---------|----------|-------------|---------|
| Kanister | 5 L      | 3173 35 | Flaschen | 20 x 500 ml | 3173 63 |
| Flaschen | 10 x 1 L | 3173 48 |          |             |         |

## triformin® medDIS\*\*

**Hände- und Hautdesinfektionsmittel – Gebrauchsfertige Lösung – Bakterizid (inkl. MRSA), tuberkulozid, fungizid (C. albicans)/levurozid, virusinaktivierend lt. Gutachten: HBV/HIV, BVDV, HCV, Rota-, Vaccinia-, Noro-Viren**

Alkoholisches, parfümfreies Desinfektionsmittel zum Einreiben in die Haut und Hände. Sehr hautverträglich, dermatologisch empfohlen für haut- bzw. allergieempfindliche Personen. VAH<sup>1</sup>- und RKI<sup>4</sup>-gelistet, in der Viruzidie-Liste des IHO<sup>2</sup> eingetragen. Dosierung über die triformin® dispenser 1.0 und triformin® dispenser 0.5.



|          |             |         |          |             |         |
|----------|-------------|---------|----------|-------------|---------|
| Flaschen | 10 x 1 L    | 4072 48 | Flaschen | 20 x 125 ml | 4072 64 |
| Flaschen | 20 x 500 ml | 4072 63 |          |             |         |

## triformin® safeDIS\*

**Händedesinfektionsmittel – Gebrauchsfertige Lösung – Bakterizid, levurozid, viruzid**

Alkoholisches, parfümfreies Desinfektionsmittel für die hygienische Händedesinfektion in allen Bereichen der Lebensmittelherstellung, -verarbeitung und Speisenzubereitung. Hervorragende Hautverträglichkeit, in dermatologischen Gutachten bestätigt. VAH<sup>3</sup>-gelistet. Dosierung über die triformin® dispenser 1.0 und triformin® dispenser 0.5.



|          |          |         |          |             |         |
|----------|----------|---------|----------|-------------|---------|
| Kanister | 10 L     | 3242 30 | Flaschen | 20 x 500 ml | 3242 63 |
| Flaschen | 10 x 1 L | 3242 48 |          |             |         |

## triformin® care

### Hautpflegecreme

Zur Pflege der Hände nach der Arbeit und in Pausen. Sehr gute Hautverträglichkeit, dermatologisch bestätigt. Frei von Parfum. Dosierung aus der 500 ml-Flasche über den triformin® dispenser 0.5.



|          |            |         |       |             |         |
|----------|------------|---------|-------|-------------|---------|
| Flaschen | 6 x 500 ml | 3105 39 | Tuben | 12 x 100 ml | 3105 15 |
|----------|------------|---------|-------|-------------|---------|

## triformin® protect

### Hautschutzcreme

Schützt die Haut nachhaltig vor Austrocknung. Langanhaltender Schutz und intensive Pflege. Sehr gute Hautverträglichkeit, dermatologisch bestätigt. Frei von Parfum. Dosierung aus der 500 ml-Flasche über den triformin® dispenser 0.5.



|          |            |         |       |             |         |
|----------|------------|---------|-------|-------------|---------|
| Flaschen | 6 x 500 ml | 3102 39 | Tuben | 12 x 100 ml | 3102 15 |
|----------|------------|---------|-------|-------------|---------|

\*\* triformin® medDIS: 2-Propanol 70% (V/V) Lösung, Zul.-Nr.: 1599.98.99; Zusammensetzung: In 100 g sind enthalten: Wirksamer Bestandteil: 2-Propanol 63,1 g; sonstiger Bestandteil: Gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion, Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut; Kühllumschläge. Gegenanzeigen: triformin® medDIS ist nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet. Nebenwirkungen: Beim Einreiben der Haut mit triformin® medDIS können Rötungen und leichtes Brennen auftreten. Warnhinweise: Leicht entzündlich! Von Zündquellen fern halten! Dicht verschlossen lagern. Bei Verschütten der Lösung sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z. B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und das Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden. Hersteller und pharmazeutischer Unternehmer: OPTIMED Pharma GmbH, Alfred-Nobel-Str. 5, 50226 Frechen

\* Robert Koch-Institut



# Dosiertechnische Lösungen

## Intelligente Dosierung – Prozesssicherheit – Datenmanagement:

Moderne Dosiersysteme mit Datenerfassung zur automatischen Versorgung und Überwachung von Reinigungs- und Desinfektionsanlagen sind Grundvoraussetzung für eine sichere Prozessführung, Validierbarkeit und dauerhaft optimale Reinigungsergebnisse.

Unsere Spezialisten konzipieren, fertigen, installieren und warten Anlagen von der einfachen Dosierstation bis hin zu zentralen Systemen für mehrere Reinigungs- und Desinfektionsgeräte und höchste Anforderungen mit Datenerfassung und -management. Hohe Qualität, Funktionalität und Professionalität sind unser Anspruch. Planen Sie Neu- und Umbauten von Anfang an mit uns!

## Zentrale Dosieranlagen

Zentrale Dosieranlagen versorgen mehrere Reinigungs- und Desinfektionsgeräte in größeren Spüleinheiten mit Reinigungs-, Neutralisations- und Klarspülmitteln. Die Installation der Dosiersysteme kann unabhängig vom Standort der Reinigungs- und Desinfektionsgeräte erfolgen. Die Verwendung von Großbinden macht die Anwendung nicht nur wirtschaftlicher, sondern auch besonders bedienerfreundlich im Hinblick auf die Arbeitssicherheit. Umständliches „Handling“ mit Kanistern entfällt, die Dosierung erfolgt im geschlossenen System! Das **weigomatic®** Baukastenprinzip verbindet individuelle Lösungen mit einem hohen Maß an Flexibilität und einer Vielfalt an Optionen für spätere Erweiterungen. Wir planen die optimal auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Dosieranlage!

Mit dem **weigomatic®** Datenmanager werden im Reinigungs- und Desinfektionsprozess wichtige Qualitätselemente integriert. So können alle relevanten Daten wie z.B. Laufzeiten der Maschine und Verbrauchsmengen an Behandlungsmitteln durch die Speichereinheit kontinuierlich erfasst und dokumentiert werden: auf dem PC oder am Touchpanel übersichtlich dargestellt, vom Schreibtisch aus einseh- und auswertbar, lokal oder via Internet analysiert und ausgewertet. Dies garantiert höchste Wirtschaftlichkeit, frühzeitige Fehler- und Störungserkennung – ein „Muss“ für alle validierten Verfahren und für optimale Prozesssicherheit.

## weigomatic® DOS Manager

Kombiniertes Dosier- und Überwachungssystem zur Steuerung der Dosierung von flüssigen Reinigungs- und Klarspülmitteln in Vorlagebehälter zur Versorgung von Reinigungs- und Desinfektionsgeräten. Die integrierte Speichereinheit erlaubt die kontinuierliche Erfassung von spezifischen Betriebsdaten wie z.B. Verbrauchsmengen und Betriebszeiten – via PC übersichtlich auswertbar und dokumentiert. Die frühzeitige Erkennung von Störungen sichert die Wirtschaftlichkeit der Abläufe und eine optimale Prozesssicherheit.

## weigomatic® identSYSTEM

Das System ermöglicht eine automatische berührungslose Produktidentifizierung, die die Verwechslungsgefahr ausschließt. Damit sorgt es nicht nur für eine intuitive Handhabung beim Gebindewechsel, sondern ist vielmehr Garant für den absolut verlässlichen Beginn eines erfolgreichen Reinigungs- und Desinfektionsprozesses. Das Funktionsprinzip ist genial einfach und basiert auf dem durchgängigen Einsatz der RFID-Technologie (Radio Frequency Identification). Mit RFID-Transponder ausgestattete Großbinden sind individuell codiert. Das ausgesendete Signal wird von einem an der Dosierstation angebrachten Empfänger erkannt. So wird absolut sichergestellt, dass das richtige Produkt zum Einsatz kommt. Die automatische Dosierung der Prozesschemikalien wird aktiviert und alle für den Reinigungsprozess wesentlichen und qualitätsrelevanten Daten und Parameter werden erfasst, wie z.B. Zeitpunkt und Zyklus des Gebindewechsels, Chargennummer sowie Haltbarkeitsdatum der Prozesschemikalie.



# Dosiertechnische Lösungen

## Dosier- und Steuertechnik – zuverlässig und leistungsstark:

Die präzise Dosierung von Reinigungs- und Klarspülmitteln und die Erfassung wichtiger Prozessdaten sind Voraussetzung für die Verfahrensvalidierung. Dr. Weigert ist seit Jahrzehnten führend in der Entwicklung professioneller Systemlösungen. Vor dem Hintergrund dieser Erfahrung bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Konzepte und Lösungen, die maximale Sicherheit, hohe Wirtschaftlichkeit und einfaches Handling garantieren.

Wer Verantwortung für den Bereich Hygiene trägt, weiß, wie wichtig es ist, auf Konzepte zu setzen, die langfristig und nachhaltig für Sicherheit sorgen. Die Dosier- und Steuertechnik von Dr. Weigert wird auf Basis modernster Anforderungen und jahrzehntelanger Erfahrung stets weiterentwickelt.

## weigomatic® Drumtainer

Das Transport- und Lagersystem für Fass-Gebinde, die ideale Lösung für ein einfaches Handling beim Wechsel und Lagern von Fässern an der Dosierstation. Ersetzt die Auffangwanne im Dosierraum: Das Fass verbleibt während der gesamten Nutzung im **weigomatic®** Drumtainer, der selbst als Auffangwanne zugelassen ist.\* Dank der vier Rollen ist der **weigomatic®** Drumtainer sehr beweglich, das Heben von Fässern entfällt. Lagerung und Transport sind einfach und sicher ohne Hubwagen oder Gabelstapler. Eine komplette Entleerung des Fasses wird durch die Neigung des Bodens sichergestellt. Farbige Deckel verhindern Produktverwechslungen. Weiterhin ist eine klare Identifizierung durch außen aufgebrachte Etiketten und Sicherheitshinweise möglich.

## Zumischgeräte

Verschiedene **neomatik®** Zumischgeräte dienen zum Herstellen und Versprühen gebrauchsfertiger Reinigungs- und Desinfektionsmittellösungen. Je nach Gerät können ein oder mehrere Reinigungs- und Desinfektionsmittelkonzentrate an das Gerät angeschlossen werden. Die Dosierung erfolgt über integrierte Dosierpumpen oder Injektoren.

## Dosiergeräte für Desinfektionsmittel

Zur Herstellung gebrauchsfertiger Lösungen von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln aus Konzentraten für die manuelle Anwendung bieten wir Zumischgeräte mit einem robusten Edelstahlgehäuse zur Wandmontage an, die der RKI-Empfehlung für dezentrale Desinfektionsmittel-Dosiergeräte\*\* entsprechen. Sie zeichnen sich durch eine einfache Bedienung aus und verfügen über eine Abschaltautomatik bei Produktmangel und eine Füllstandsüberwachung.

Weitere Informationen unter: [www.drweigert.de](http://www.drweigert.de) »neodisher Medizin»Dosiertechnik

\* DIBt-Zulassungsnummer Z-40.22-478. Beschreibung : allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für ortsfeste Auffangvorrichtung aus Polyethylen (PE-LLD) zur Aufnahme von Lagerbehältern (200 L) aus Polyethylen (PE-HD) mit Bezeichnung Drumtainer

\*\* Anforderungen an Gestaltung, Eigenschaften und Betrieb von dezentralen Desinfektionsmittel-Dosiergeräten, Bundesgesundheitsbl - Gesundheitsforsch - Gesundheitsschutz 2004 · 47:67–72



# Anwendung- & Dosierhilfen

## Dosier- und Anwendungshilfen für Kanister und Fässer

|                                                                        |                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Schlüssel aus Kunststoff zum leichten Öffnen von Kanistern und Fässern | Art.-Nr. 9810 07 |
| Schlüssel aus Aluminium zum leichten Öffnen von Fässern                | Art.-Nr. 9810 05 |
| Kanisterpumpe für 5 L-, 10 L- und 12 kg-Kanister (30 ml Hub)           | Art.-Nr. 9807 01 |
| Kanisterpumpe für 20 L-, 20 kg- und 25 kg-Kanister (30 ml Hub)         | Art.-Nr. 9807 00 |
| Handhebelpumpe für Fässer                                              | Art.-Nr. 9803 08 |
| Auslaufhahn für 5 L-, 10 L- und 12 kg-Kanister                         | Art.-Nr. 9800 04 |
| Auslaufhahn für 20 L-, 20 kg- und 25 kg-Kanister                       | Art.-Nr. 9800 03 |
| Auslaufhahn für Fässer                                                 | Art.-Nr. 9800 02 |
| Schraubausgießer für 5 L-, 10 L- und 12 kg-Kanister                    | Art.-Nr. 9810 11 |
| Schraubausgießer für 20 L-, 20 kg- und 25 kg-Kanister                  | Art.-Nr. 9810 10 |
| Fasstrichter                                                           | Art.-Nr. 9803 11 |
| Fasskeil, für eine optimale Restentleerung durch Schrägstellen         | Art.-Nr. 9803 12 |
| Fasskarre                                                              | Art.-Nr. 9803 10 |
| Auffangwanne für zwei Fässer                                           | Art.-Nr. 0763 90 |



## Zubehör

|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| Sprühaufsatz für neoform MED rapid und neoform K Spray | Art.-Nr. 9500 07 |
| 500 ml Messbecher mit Skala                            | Art.-Nr. 9801 06 |
| 1000 ml Messbecher mit Skala                           | Art.-Nr. 9801 00 |



## Persönliche Schutzausrüstung

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Schutzhandschuhe | Art.-Nr. 9880 05 |
| Schutzbrille     | Art.-Nr. 9880 06 |
| Augenspülflasche | Art.-Nr. 9880 07 |



## Dosier- und Druckspender für triformin® Produkte

|                                                                                                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Dosierspender</b>                                                                                                          |                  |
| triformin® dispenser 1.0 gold* zur Dosierung aus 1 L-Flaschen                                                                 | Art.-Nr. 9810 51 |
| triformin® dispenser 0.5 gold* zur Dosierung aus 500 ml -Flaschen                                                             | Art.-Nr. 9810 21 |
| triformin® dispenser 1.0 silver** zur Dosierung aus 1 L-Flaschen                                                              | Art.-Nr. 9810 52 |
| triformin® dispenser 0.5 silver** zur Dosierung aus 500 ml -Flaschen                                                          | Art.-Nr. 9810 22 |
| triformin® dispenser 1.0 basic zur Dosierung aus 1 L-Flaschen                                                                 | Art.-Nr. 9810 53 |
| triformin® dispenser 0.5 basic zur Dosierung aus 500 ml -Flaschen                                                             | Art.-Nr. 9810 23 |
| <b>Druckspender</b>                                                                                                           |                  |
| für 1 L-Flaschen triformin® HR, triformin® wash, triformin® medDIS, triformin® safeDIS                                        | Art.-Nr. 9802 00 |
| für 0,5 L-Flaschen triformin® HR, triformin® wash, triformin® medDIS, triformin® safeDIS                                      | Art.-Nr. 9802 03 |
| für 0,5 L-Flaschen triformin® care und triformin® protect                                                                     | Art.-Nr. 9802 02 |
| <b>Wandhalter</b>                                                                                                             |                  |
| für 1 L-Flaschen triformin® HR, triformin® wash, triformin® medDIS, triformin® safeDIS                                        | Art.-Nr. 9810 56 |
| für 0,5 L-Flaschen triformin® HR, triformin® wash, triformin® medDIS, triformin® safeDIS, triformin® care, triformin® protect | Art.-Nr. 9810 59 |





# System-Service

## Kontinuierliche Betreuung

Beratung gehört zu unseren wichtigsten Aufgaben: durch Leistung überzeugen und Lösungen für individuelle Fragestellungen finden. System-Service bedeutet kontinuierliche Betreuung, damit erstklassige Resultate dauerhaft erzielt werden. Dosieranlagen werden regelmäßig gewartet. Wir schulen Ihr Personal und schaffen die Voraussetzungen für sichere Abläufe.

## Produkte und Systemlösungen aus einer Hand

... sind entscheidend, wenn es um maschinelle Reinigungsprozesse geht. Hygiene-Sicherheit bei höchster Wirtschaftlichkeit und Werterhaltung empfindlicher Materialien – mit **neodisher®** lassen sich diese Ziele hervorragend verwirklichen.

Für jeden Kunden entwickelt Dr. Weigert individuelle Lösungen, die über die Wahl des richtigen Reinigungsmittels weit hinaus gehen. Dabei steht die sorgfältige Analyse der Ist-Situation am Anfang eines jeden Hygienekonzeptes. Wir ermitteln die Ursachen für Materialveränderungen und führen dazu neben mikroskopischen Oberflächenanalysen systematische Untersuchungen durch. Auf dieser Basis geben wir praxisgerechte Empfehlungen, um das erneute Auftreten von Verfärbungen etc. zu vermeiden – für dauerhaft erstklassige Resultate.

## Ihr Partner für perfekte Hygiene.

In der Produkt- und Verfahrensentwicklung ist **neodisher®** immer einen Schritt voraus. Eine enge Zusammenarbeit mit den Herstellern von Reinigungsgeräten und Spülgütern ist die beste Basis für die Entwicklung innovativer Prozesschemikalien und die Konzeption neuer Verfahren.

**weigomatic®** Dosiersysteme garantieren einen sparsamen und effizienten Einsatz. Maßgeschneiderte Lösungen für die Praxis – für Sicherheit und Werterhaltung!

Auch für die Umfeld- und Personalhygiene bietet Dr. Weigert perfekte Lösungen, die sich in der Praxis täglich bewähren.



# Anwendungsempfehlungen

## Aufbereitung von Laborglas & Utensilien

|  | neodisher® LaboClean FLA | neodisher® LaboClean FT | neodisher® LaboClean FM | neodisher® LaboClean A 8 | neodisher® LaboClean F | neodisher® LaboClean LA | neodisher® LaboClean GK | neodisher® LaboClean PLM | neodisher® LaboClean UW | neodisher® EM | neodisher® Entschäumer S | neodisher® N | neodisher® Z | neodisher® LM 2 | neodisher® LM 3 | neodisher® LM 10 | neodisher® PM 5 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>maschinelle Reinigung</b>                                                      |                          |                         |                         |                          |                        |                         |                         |                          |                         |               |                          |              |              |                 |                 |                  |                 |
| mildalkalischer Reiniger                                                          |                          |                         |                         |                          |                        |                         | •                       | •                        |                         |               |                          |              |              |                 |                 |                  |                 |
| alkalischer Reiniger                                                              | •                        | •                       | •                       | •                        |                        |                         |                         |                          | •                       |               |                          |              |              |                 |                 |                  |                 |
| hochalkalischer Reiniger                                                          |                          |                         |                         |                          | •                      | •                       |                         |                          |                         |               |                          |              |              |                 |                 |                  |                 |
| universell einsetzbar                                                             | •                        |                         |                         | •                        |                        |                         |                         |                          |                         |               |                          |              |              |                 |                 |                  |                 |
| Reinigungsverstärker                                                              |                          |                         |                         |                          |                        |                         |                         |                          |                         | •             |                          |              |              |                 |                 |                  |                 |
| Entschäumer                                                                       |                          |                         |                         |                          |                        |                         |                         |                          |                         |               | •                        |              |              |                 |                 |                  |                 |
| saurer Reiniger                                                                   |                          |                         |                         |                          |                        |                         |                         |                          |                         |               |                          | •            | •            |                 |                 |                  |                 |
| Neutralisationsmittel                                                             |                          |                         |                         |                          |                        |                         |                         |                          |                         |               |                          | •            | •            |                 |                 |                  |                 |
| <b>manuelle Reinigung</b>                                                         |                          |                         |                         |                          |                        |                         |                         |                          |                         |               |                          |              |              |                 |                 |                  |                 |
| mildalkalischer Reiniger                                                          |                          |                         |                         |                          |                        |                         |                         |                          |                         |               |                          |              |              | •               |                 |                  | •               |
| alkalischer Reiniger                                                              |                          |                         |                         |                          |                        |                         |                         |                          |                         |               |                          |              |              |                 | •               | •                |                 |




# Anwendungsempfehlungen


## Industrielle Teilereinigung

|  | neodisher® ProTech 5 | neodisher® ProTech 8 | neodisher® ProTech 9 | neodisher® ProTech 10 | neodisher® FS | neodisher® ProTech 16 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| pH-neutraler Reiniger                                                             | ●                    |                      |                      |                       |               |                       |
| mildalkalischer Reiniger                                                          |                      | ●                    |                      |                       |               |                       |
| alkalischer Reiniger                                                              |                      |                      | ●                    |                       |               |                       |
| hochalkalischer Reiniger                                                          |                      |                      |                      | ●                     | ●             |                       |
| Korrosionsschutz-/<br>Nachspülmittel                                              |                      |                      |                      |                       |               | ●                     |

## Reinigung in der Tierhaltung
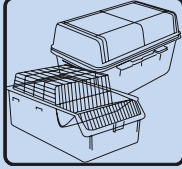
|  | neodisher® LaboClean FLA | neodisher® N | neodisher® Polyklar | neodisher® TS | neodisher® LM 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|---------------|-----------------|
| alkalischer Reiniger,<br>maschinelle Anwendung                                     | ●                        |              |                     |               |                 |
| saurer Reiniger,<br>maschinelle Anwendung                                          |                          | ●            |                     |               |                 |
| Nachspülmittel                                                                     |                          |              | ●                   | ●             |                 |
| Reiniger,<br>manuelle Anwendung                                                    |                          |              |                     |               | ●               |

## Händehygiene
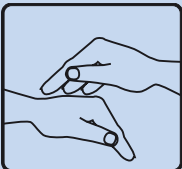
|  | triformin® HR | triformin® wash | triformin® medDIS* | triformin® safeDIS* | triformin® care | triformin® protect |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| Händereiniger                                                                       | ●             | ●               |                    |                     |                 |                    |
| Händedesinfektionsmittel                                                            |               |                 | ●                  | ●                   |                 |                    |
| Hautpflegecreme                                                                     |               |                 |                    |                     | ●               |                    |
| Hautschutzcreme                                                                     |               |                 |                    |                     |                 | ●                  |

## Flächenreinigung & -desinfektion

|  | neoform MED AF* | neoform MED FF* | neoform K plus* | neoform MED rapid* | neoform K Spray* |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Reinigungsmittel                                                                     | ●               | ●               | ●               |                    |                  |
| Desinfektionsmittel                                                                  | ●               | ●               | ●               |                    |                  |
| Schnelldesinfektionsmittel                                                           |                 |                 |                 | ●                  | ●                |



# DR. WEIGERT

Hygiene mit System

In Sachen Hygiene  
immer vor Ort –  
**in Europa und  
weltweit.**



Chemische Fabrik  
Dr. Weigert GmbH & Co. KG  
Mühlenhagen 85  
20539 Hamburg  
Tel.: +49-40-7 89 60-0  
info@drweigert.de

Dr. Weigert  
Handelsgesellschaft m.b.H.  
Wienerbergstraße 11/12 a  
1100 Wien  
Tel.: +43-1-99460 6275  
info@drweigert.at

Dr. Weigert (Schweiz) AG  
Baarerstrasse 14  
6300 Zug  
Tel.: +41-41 561 32 90  
info@drweigert.ch

Dr. Weigert Nederland BV  
Balkendwarsweg 3  
9405 PT Assen  
Tel.: +31-592-31 93 93  
info@drweigert.nl

Dr. Weigert UK Ltd  
Watling Court, Orbital Plaza,  
Watling Street, Cannock  
WS11 0EL  
Tel.: +44-1543 404 633  
enquiry@drweigert.com

Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.  
ul. Wybrzeże Gdynskie 6A  
01-531 Warszawa  
Tel.: +48-22-616 02 23/31  
office\_pl@drweigert.com

Dr. Weigert España  
Edificio Cuzco IV  
Paseo de la Castellana 141,  
Planta 8  
28046 Madrid  
Tel.: +34-91 572 65 77  
info.spain@drweigert.com

Dr. Weigert France SAS  
22 avenue des Nations  
Immeuble le Raspail  
BP 88035 Villepinte  
95932 Roissy CDG Cedex  
Tel.: +33-1-48 67 90 33  
info@drweigert.fr

Dr. Weigert Hungária Kft.  
Hunyadi János út 16  
1117 Budapest  
Tel.: +36-1-237 06 04  
Info@drweigert.hu

Dr. Weigert Management System – Certified according to DIN EN ISO 9001/13485/14001

[www.drweigert.com](http://www.drweigert.com)